

牙椅水路解决方案

ICX® & ICX Renew®



水路维护 为何如此重要？


患者相信你在他们口腔中使用的是最高质量的水。遗憾的是，事实可能并非如此。牙椅水路 (DUWL) 的直径小且流速低，这会促进细菌生长，导致出水口处微生物密集。

研究表明，在 5 天内，每毫升微生物计数可超过 200,000 个菌落形成单位。¹ 实际上，曾有报道细菌计数高达 1,000,000 CFU/mL。² 除非您采取特殊设计的措施来预防和消除微生物，否则请勿相信任何牙椅可以避免细菌滋生。

1. Louis G. DePaola, D.D.S., MS.; Denis Mangan, Ph.D.; Shannon E. Mills, D.D.S.; William Costerton, Ph.D.; Jean Barbeau, Ph.D.; Brian Shearer, Ph.D.; John Bartlett, M.D. A review of the science regarding dental unit waterlines, ADA, Vol. 133, September 2002, p. 1199.

2. Jean Barbeau, Richard Tanguay, Esther Faucher, Catherine Avezard, Luc Trudel, Ludger Cote, André P. Prévost; Multiparametric Analysis of Waterline Contamination in Dental Units, Applied and environmental Microbiology, November 1996, p. 3954. Copyright 1996, American Society for Microbiology.

您的患者受到保护了吗？

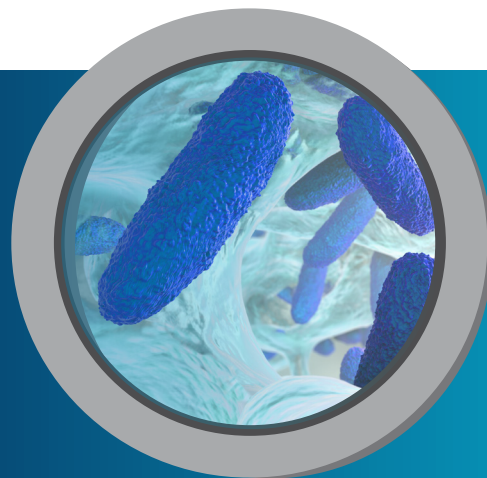


微生物数量可达到

>200,000 (CFU/mL)



如果 5 天

不处理

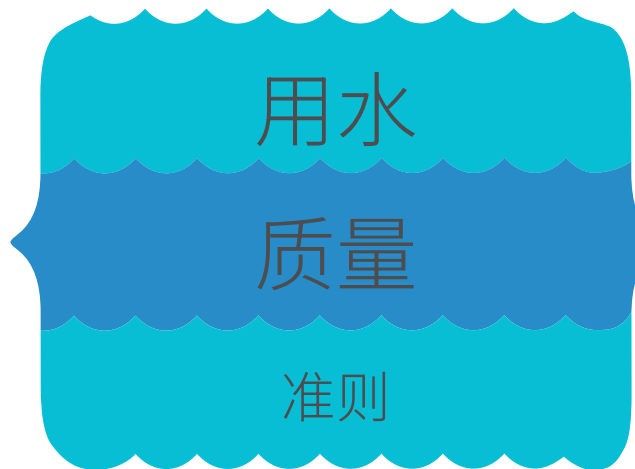


牙椅水质<准则或要求因地区而异，通常以每毫升菌落形成单位 (CFU/mL) 的形式规定。

100 CFU/mL (英国, 欧盟)

200 CFU/mL (澳大利亚)

500 CFU/mL (美国)

请遵循您所在地区的最新建议。

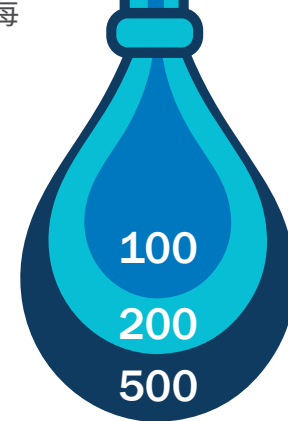

维护。监测。消毒。清洁的三个步骤。

如何为患者提高最高标准的水质？除了日常的水路维护方案，务必监测水质并定期对管路进行消毒，以清除沉淀和污染物。这三个步骤有助于维护您的牙椅水路。



1. 维护

每天维护水路。

A-dec® ICX® 水路净水片经过特殊配制，可维持牙椅水路，防止污秽异味细菌的累积，并保持牙椅水路中的微生物 ≤ 10 CFU/mL。操作十分简单。只需在每次向独立供水瓶中注水之前加入一片全新的 ICX 净水片即可。ICX 在系统中的效力可维持至少两周。

2. 监测。

定期监测水质。

您的消毒级别取决于您所在地区（尤其是诊室）的水质要求。此重要步骤的频率取决于您的测试结果。最初，每月检测一次水质。如果结果连续三个月通过规定的处理级别，则将检测频率降低为每三个月一次。该检测应定量测量异养细菌。

请您的经销商推荐水质监测检测套件或实验室服务以帮助执行此步骤。

3. 消毒

根据需要进行水路消毒。

当水路的细菌水平超过规定的水质处理级别时，则进行消毒处理。消毒处理可清除牙科设备水路中的沉积物，并去除污秽异味细菌。A-dec 建议您在首次使用本系统之前，用 ICX Renew® 对牙椅水路进行消毒。首次使用后，如果细菌的检测结果显示高于水质处理级别，请对水路进行消毒。使用 ICX 净水片持续进行水路维护。

A-DEC 建议

当牙椅的水路细菌含量超出建议的处理级别时, 请执行消毒处理。



如果 CFU/mL 检测结果 $<$ 水质标准 $=$ 继续使用 ICX 进行日常维护



用于日常处理的
A-dec ICX 净水片



如果 CFU/mL 检测结果 $>$ 水质标准 $=$ 使用 ICX Renew 进行牙椅水路消毒



用于消毒处理的
A-dec ICX Renew

消毒时, 让
RENEW ICX

静置

一晚

冲洗线路

达到



清洁

A-dec 的水路处理解决方案。

便捷。高效。实惠。

维护。

ICX 净水片

ICX 泡腾片使用方便, 无需测量或混合。只需在每次向独立供水瓶中注水之前加入一片即可。随着药片的溶解, 其成分将溶解到水中, 有助于保持低于或等于每毫升 10 菌落形成单位 (CFU/mL), 从而防止污秽异味细菌累积。每次使用时, ICX 会在系统中持续起效, 保护水路免受进一步污染, 并减少频繁消毒的需求。

ICX 的优势

- 保持牙椅水路中的微生物不超过 10 CFU/mL。
- 减少沉积物聚集。
- 持续存在于水中; 提供预防性主动解决方案。
- 在不使用设备期间, 它在水中的效力可维持至少两周。
- 无需在夜间清洁水管线路。
- 兼容修复性粘合材料。不会影响粘合强度。
- 温和作用于牙科设备。



提供两种尺寸。
销售包装为每盒 50 片。

与常规测试和执行规程结合使用时, A-dec ICX 和 ICX Renew 可帮助简化水路维护程序。
ICX 产品随时可用, 配方中不含刺激性化学物质, 使用 ICX 产品处理牙椅水路有助于保护您的资产。

消毒 ICX Renew 牙椅 水路消毒处理

速效消毒液可去除牙椅水路中的污秽异味细菌。只需将两种溶液混合到空的供水瓶中, 充盈管路, 然后静置一晚。消毒液为蓝色液体, 显示溶液正在水路中。完成消毒处理后, 用水冲洗线路并恢复常规使用。

ICX Renew 的优势

- 渗透并去除累积的污秽异味微生物污染细菌。
- 蓝色表明溶液正在水路中起效。
- 对设备无腐蚀且温和。
- 不会腐蚀或堵塞水管线路。
- 无异味配方。



两部分解决方案。
每箱九瓶。

ICX 产品通过 A-dec 的全球授权经销商网络独家
分销。


请访问 a-dec.com 或联系您的授权经销商了解
更多信息。

Reliable Creative Solutions


FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE



使用 ICX 和 ICX RENEW 解决方案进行维护。

 @A-decDental

 @A-decDental

 @A-dec Inc.

 @AdecDental

 @A-dec Inc.

A-dec 总部

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132 美国

电话: 1.800.547.1883 (美国/加拿大境内)

电话: +1.503.538.7478 (美国/加拿大境外)

a-dec.com

A-dec 澳大利亚

电话: 1.800.225.010 (澳大利亚境内)

电话: +61.(0)2.8332.4000 (澳大利亚境外)

A-dec 中国

电话: 400.600.5434 (中国境内)

电话: +86.571.89026088 (中国境外)

A-dec 英国

电话: 0800.233285 (英国境内)

电话: +44.(0).24.7635.0901 (英国境外)

所示的颜色和产品可能会与实际材料稍有不同;并可随时更改,恕不另行通知。有关实际颜色的样品和最新的产品信息,请与您所在地区获授权的A-dec经销商接洽。本文件上的所有商标均受A-dec、其关联机构及其在美国和美国以外国家/地区的集体供应商的商标权的保护。

©2023 A-dec Inc. 保留所有权利。85.0884.06/E-only/9-22(10-23)/修订版A2

The A-dec logo, featuring a stylized 'a' with a caduceus symbol inside it, followed by the word 'dec' in a bold, sans-serif font.