


Sterownik nożny pracą końcówek z dźwignią A-dec

Informacje wstępne

Sterownik nożny pracą końcówek służy do regulacji przepływu powietrza napędzającego do aktywnej końcówki i emituje sygnał powodujący aktywację przepływu powietrza chłodzącego lub wody chłodzącej.

Przełącznik między funkcją napędu końcówek a funkcją przedmuchu na końcówkach powoduje uruchomienie napędu albo przedmuchu na końcówkach. Przedmuch na końcówkach przepuszcza strumień powietrza przez końcówkę bez aktywowania wiertła. Funkcja napędu końcówek zależy od ich rodzaju. Szczegółowe informacje można uzyskać od autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

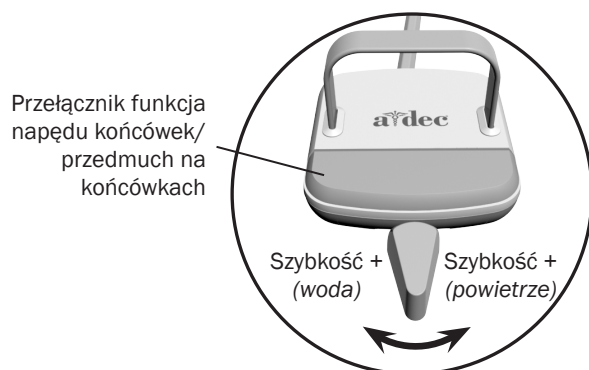

Aktywacja i obsługa końcówki

Aby aktywować końcówkę, należy wyjąć ją z uchwytu lub pociągnąć do przodu wysięgnik. Aby zapewnić właściwe działanie końcówki, należy używać sterownika nożnego pracą końcówek.

| Obsługa | Czynność |
|---|--|
| Uruchomienie końcówki z wodą chłodzącą. | Przesunąć dźwignię w lewo. Przesuwać dalej, aby zwiększyć szybkość. |
| Uruchomienie końcówki bez wody chłodzącej. | Przesunąć dźwignię w prawo. Przesuwać dalej, aby zwiększyć szybkość. |
| Uruchomienie funkcji napędu lub przedmuchu na końcówkach. | Nacisnąć przełącznik między funkcją napędu a przedmuchem na końcówkach.* |
| Obsługa kamery wewnątrzustnej. | Przesunąć dźwignię w lewo lub w prawo, aby uzyskać obraz.* |

* W przypadku pytań dotyczących obsługi lub konfiguracji zintegrowanych akcesoriów A-dec należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem firmy A-dec.



UWAGA Technik może zmienić działanie dźwigni sterownika nożnego pracą końcówek (tak aby przesunięcie dźwigni w lewo aktywowało napęd, a w prawo – przepływ wody). Szczegółowe informacje można uzyskać od autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.



UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania końcówki można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z konsolą.

Dane techniczne i gwarancja

Informacje na temat gwarancji zostały podane w dokumencie *Informacja o zgodności z przepisami, dane techniczne i gwarancja* (nr części 86.0221.18) dostępnym w sekcji Baza dokumentów pod adresem www.a-dec.com.



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
USA
Tel.: 1 800 547 1883 w USA i Kanadzie
Tel.: 1 503 538 7478 spoza USA i Kanady
Faks: 1 503 538 0276
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Australia
Tel.: 1.800.225.010 w Australii
Tel.: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

A-dec Chiny

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Chiny
Tel.: +1 503 538 7478

A-dec Wielka Brytania

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
Anglia
Tel.: 0800 ADECUK (233285) w Wielkiej Brytanii
Tel.: +44 (0) 24 7635 0901 spoza Wielkiej Brytanii

86.0559.18 Rev B Copyright
2015 A-dec Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.