


A-dec Ayak Kumandası Kolu

Genel bakış

Ayak kumandası, başlığı etkinleştirmek için hareket havasını düzenler ve soğutucu hava ile soğutucu su akışını etkinleştiren bir hava sinyali sağlar.

Aksesuar/chip blower anahtarı, bir aksesuar işlevini veya chip blower'ı etkinleştirir. Chip blower, başlık frezini etkinleştirmeden başlık içinden hava püskürtür. Aksesuarın işlevi entegre aksesuar cihazınıza bağlıdır. Daha fazla bilgi için yetkili A-dec satıcınızla iletişim kurun.

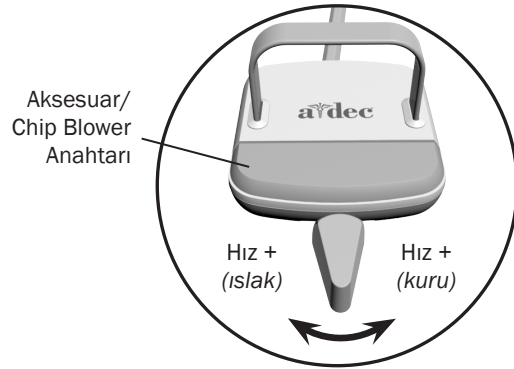

Başlıkları Etkinleştirme ve Çalıştırma

Bir başlığı etkinleştirmek için tutucusundan kaldırın veya kamçıyı ileri doğru çekin. İsteddiğiniz başlık işlemini uygulamak için ayak kumandasını kullanın.

Çalıştırma	Prosedür
Bir başlığı soğutucu suyla çalıştırır.	Kolu sola çekin. Hızı artırmak için daha uzağa doğru çekin.
Bir başlığı soğutucu su olmadan çalıştırır.	Kolu sağa çekin. Hızı artırmak için daha uzağa doğru çekin.
İsteğe bağlı aksesuarı veya chip blower'ı çalıştırır.	Aksesuar/chip blower anahtarına basın.*
Ağız içi kamerayı çalıştırır.	Bir görüntüyü yakalamak için kolu sola veya sağa çekin.*

* Entegre A-dec aksesuarlarınızın çalışması ve konfigürasyonu ile ilgili sorularınız için yetkili A-dec satıcınızla iletişim kurun.



NOT Ayak kumandası kolunun işlevin yönleri bir teknisyen tarafından değiştirilebilir (bu durumda sol tarafa çektiğinizde kuruya, sağa çektiğinizde ıslığa geçer). Daha fazla bilgi için yetkili A-dec satıcınızla iletişim kurun.



NOT Başlık ayarlama bilgileri için, tablet sisteminizle birlikte sağlanan kullanma talimatlarına bakın.

Teknik Özellikler ve Garanti

Garanti Bilgileri, www.a-dec.com adresindeki Belge Kitaplığında bulunan *Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti belgesinde* (p/n 86.0221.15) sağlanmaktadır.



A-dec Genel Merkezi

2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132
ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: 1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
Faks: 1.503.538.0276
www.a-dec.com

A-dec Avustralya

Unit 8
5-9 Ricketty Street
Mascot, NSW 2020
Avustralya
Tel: 1.800.225.010 Avustralya içinden
Tel: +61 (0)2 8332 4000 Avustralya dışından

A-dec Çin

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.
528 Shunfeng Road
Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311106
Zhejiang, Çin
Tel: +1.503.538.7478

A-dec Birleşik Krallık

Austin House, 11 Liberty Way
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ
İngiltere
Tel: 0800 ADECUK (233285) Birleşik Krallık içinden
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 Birleşik Krallık dışından

86.0559.15 Rev B
Telif Hakkı 2015 A-dec Inc.
Tüm hakları saklıdır.