


# A-dec hendelvoetpedaal

## Overzicht

Het voetpedaal reguleert de aandrijfvlucht voor activering van het handstuk en geeft een luchtsignaal af dat de stroom van de luchtkoeling en de waterkoeling activeert.

De schakelaar voor het accessoire/de schilferblazer activeert een accessoirefunctie of de schilferblazer. De schilferblazer stuurt een luchtstroom door het handstuk zonder het handstukboortje te activeren. De accessoirefunctie is afhankelijk van de geïntegreerde hulpstukken. Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.

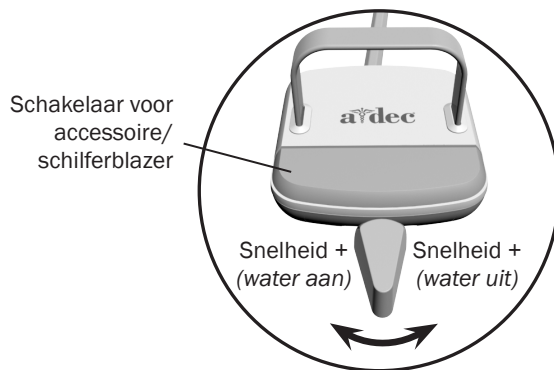

## Activering en werking van het handstuk

Als u een handstuk wilt activeren, tilt u het uit de houder of trekt u de zweeparm naar voren. Gebruik het voetpedaal voor de gewenste werking van het handstuk.

Werking	Procedure
Een handstuk met waterkoeling gebruiken.	Schuif de hendel naar links. Schuif de hendel verder om de snelheid te verhogen.
Een handstuk zonder waterkoeling gebruiken.	Schuif de hendel naar rechts. Schuif de hendel verder om de snelheid te verhogen.
Het optionele accessoire of de schilferblazer gebruiken.	Druk op de schakelaar voor het accessoire/de schilferblazer.*
Bedien de intraorale camera.	Schuif de hendel naar links of rechts om een beeld vast te leggen.*

\* *Neem voor vragen over de werking of configuratie van de ingebouwde A-dec-accessoires contact op met de bevoegde A-dec-vertegenwoordiger.*



**OPMERKING** de hendelvoetpedaalfunctie kan door een monteur worden omgedraaid (naar links voor water uit, naar rechts voor water aan). Voor meer informatie neemt u contact op met de erkende A-dec dealer.



**OPMERKING** voor informatie over de afstelling van het handstuk raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij de instrumentenbrug is geleverd.

# Specificaties en garantie

---

Voor informatie over garantie kunt u het document *Informatie betreffende wet- en regelgeving, specificaties en garantieen garantie* (onderdeelnummer 86.0221.14) raadplegen. Dit document is beschikbaar in de Document Library op [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



## **A-dec hoofdkantoor**

2601 Crestview Drive  
Newberg, OR 97132  
VS  
Tel: 1.800.547.1883 binnen VS/Canada  
Tel: 1.503.538.7478 buiten VS/Canada  
Fax: 1.503.538.0276  
[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

## **A-dec Australië**

Unit 8  
5-9 Ricketty Street  
Mascot, NSW 2020  
Australië  
Tel: 1.800.225.010 binnen AUS  
Tel: +61 (0)2 8332 4000 buiten AUS

## **A-dec China**

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.  
528 Shunfeng Road  
Qianjiang Economic Development Zone  
Hangzhou 311106  
Zhejiang, China  
Tel: +1.503.538.7478

## **A-dec Verenigd Koninkrijk**

Austin House, 11 Liberty Way  
Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ  
Engeland  
Tel: 0800 ADECUK (233285) binnen VK  
Tel: +44 (0) 24 7635 0901 buiten VK

86.0559.14 Rev B  
Copyright 2015 A-dec Inc.  
Alle rechten voorbehouden.