

有关测试点和功能的列表，请参阅产品电路板页面。有关故障排除、维修、零件标识、维护等其他信息，请参考相关的A-dec维修指南或维修参考。A-dec支持文档的当前修订版本可从[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)上的文档库获取。

---

 **注意** 电路板对静电敏感。触摸电路板或对电路板进行连接时，必须采取防静电(ESD)预防措施。电路板应仅由电工或合格的维修人员来安装。


---

<b>A-dec 200、Performer、Decade和Cascade治疗椅电路板</b> .....	<b>2</b>
<b>A-dec 311\411治疗椅电路板</b> .....	<b>3</b>
<b>A-dec 511治疗椅电路板</b> .....	<b>4</b>

## A-dec 200、Performer、Decade和Cascade治疗椅电路板


- **BKUP** - 提升治疗椅椅背。
- **BSUP** - 提升治疗椅底座。
- **BSDN** - 降低治疗椅底座。
- **BKDN** - 降低治疗椅椅背。
- **PRGM (按钮)** - 要设置治疗椅档位, 请定位治疗椅, 按下此按钮, 您会听到一声蜂鸣声, 然后在三秒内将跳线置于PRGM档位之一, 您将听到三声蜂鸣声, 表示档位已设置。
- **PRGM 0** - 预设治疗椅档位0, 通常用于患者进入/退出档位。
- **PRGM 1** - 预设治疗椅档位1, 通常用于患者仰卧档位。
- **PRGM 2** - 预设治疗椅档位2, 通常用于患者仰卧档位。
- **PRGM 3** - 预设治疗椅档位3, 通常用于将椅背移至X光检查/漱口档位。取下跳线并更换它, 以将治疗椅返回至其原始档位。
- **EN/DIS TP/FS** - **注意:** 此档位在2005年6月前制造的板上不起作用。  
要启用/禁用程序和预设触控板/脚踏面板按钮, 请将跳线置于此档位, 然后按下并按住按钮以启用/禁用。三声蜂鸣表示按钮已启用。一声蜂鸣表示按钮已禁用。
- **FACT DEFAULT** - 将治疗椅预设重置为出厂设置。
- **BK POT** - 要验证椅背档位电位器电压, 请将电压表的正极引线置于BK POT测试点的左引脚上, 而将负极引线置于SPARE测试点的左引脚上。
- **BS POT** - 要验证底座档位电位器电压, 请将电压表的正极引线置于BS POT测试点的左引脚上, 而将负极引线置于SPARE测试点的左引脚上。
- **SPARE** - 跳线存储的非活动档位。
- **SPARE** - 跳线存储的非活动档位。

PRGM按钮

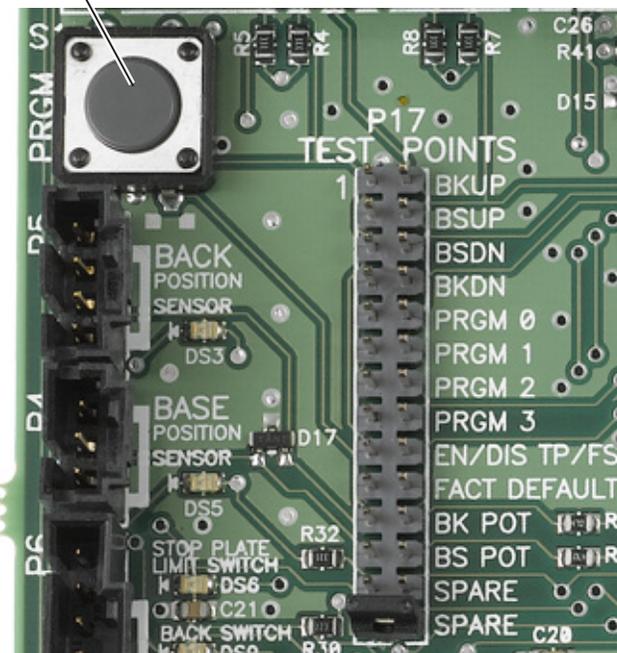

## A-dec 311\411治疗椅电路板

- **SPARE** - 跳线存储的非活动档位。
- **FACT DEFAULT** - 将治疗椅预设重置为出厂设置。
- **BACK UP** - 提升治疗椅椅背。
- **BACK DOWN** - 降低治疗椅椅背。
- **BASE UP** - 提升治疗椅底座。
- **BASE DOWN** - 降低治疗椅底座。
- **PRGM MEMORY** - 要设置治疗椅档位，请定位治疗椅，将跳线置于此档位，您会听到一声蜂鸣声，然后将跳线置于PRGM档位之一，您将听到三声蜂鸣声，表示档位已设置。
- **PRGM 0** - 预设治疗椅档位0，通常用于患者进入/退出档位。
- **PRGM 1** - 预设治疗椅档位1，通常用于患者仰卧档位。
- **PRGM 2** - 预设治疗椅档位2，通常用于患者仰卧档位。
- **PRGM 3** - 预设治疗椅档位3，通常用于将椅背移至X光检查/漱口档位。取下跳线并更换它，以将治疗椅返回至其原始档位。
- **EN/DIS TP/FS** - **注意：**此档位在2005年6月前制造的板上不起作用。  
用于启用/禁用程序和预设触控板/脚踏面板按钮，或管理软底座限制。
  - **禁用/启用按钮** - 将跳线置于此档位，然后按下并按住触控板/脚踏面板按钮以启用/禁用。三声蜂鸣表示按钮已启用。一声蜂鸣表示按钮已禁用。
  - **设置软底座限制** - 定位治疗椅，将跳线置于此档位，按住BASE UP或BASE DOWN，直到您听到三声蜂鸣声。
  - **删除软底座限制** - 将跳线置于此档位，按住BASE UP或BASE DOWN，直到您听到一声蜂鸣声，表示设置已禁用。
  - **更改软底座限制** - 删除限制，然后重置。

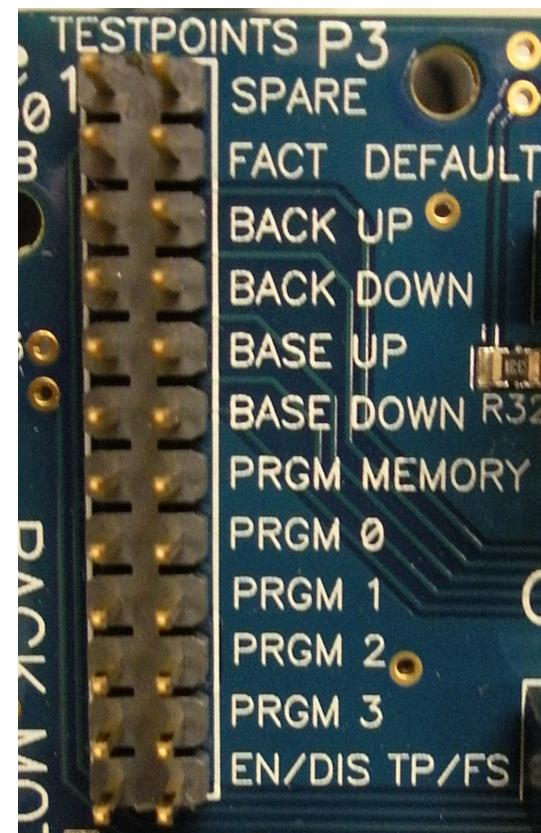

## A-dec 511治疗椅电路板

- SPARE - 跳线存储的非活动档位。
- FACT DEFAULT - 将治疗椅预设重置为出厂设置。
- BACK UP - 提升治疗椅椅背。
- BACK DN - 降低治疗椅椅背。
- BASE UP - 提升治疗椅底座。
- BASE DN - 降低治疗椅底座。
- PROGRAM - 要设置治疗椅档位, 请定位治疗椅, 将跳线置于此档位, 您会听到一声蜂鸣声, 然后将跳线置于PRGM档位之一, 您将听到三声蜂鸣声, 表示档位已设置。
- PRGM 0 - 预设治疗椅档位0, 通常用于患者进入/退出档位。
- PRGM 1 - 预设治疗椅档位1, 通常用于患者仰卧档位。
- PRGM 2 - 预设治疗椅档位2, 通常用于患者仰卧档位。
- PRGM 3 - 预设治疗椅档位3, 通常用于将椅背移至X光检查/漱口档位。取下跳线并更换它, 以将治疗椅返回至其原始档位。
- EN/DIS TP/FS - **注意:** 此档位在2005年6月前制造的板上不起作用。使用此档位启用/禁用程序或预设触控板/脚踏面板按钮, 或管理软底座限制。
  - 禁用/启用按钮 - 将跳线置于此档位, 然后按住触控板/脚踏面板按钮以启用/禁用。三声蜂鸣表示按钮已启用。一声蜂鸣表示按钮已禁用。
  - 设置软底座限制 - 定位治疗椅, 将跳线置于此档位, 按住BASE UP或BASE DN, 直到您听到三声蜂鸣声。
  - 删除软底座限制 - 将跳线置于此档位, 按住BASE UP或BASE DN, 直到您听到一声蜂鸣声, 表示设置已禁用。
  - 更改软底座限制 - 删除限制, 然后重置。

