


A-dec® 300

a dec®

A-dec — Отличия в Деталях

Создано для жизни

Для A-dec не существует мелочей. Мы уделяем внимание каждой детали, вплоть до крепежа, который используется в нашей продукции. Именно поэтому большую часть оборудования мы производим сами из высококачественного сырья, что является важным элементом обеспечения его исключительного качества. Некоторые детали могут быть скрыты от глаз, но от них зависит удобство и функциональность каждого конкретного продукта, выпущенного под нашей маркой. Что может быть важнее для вашего бизнеса?

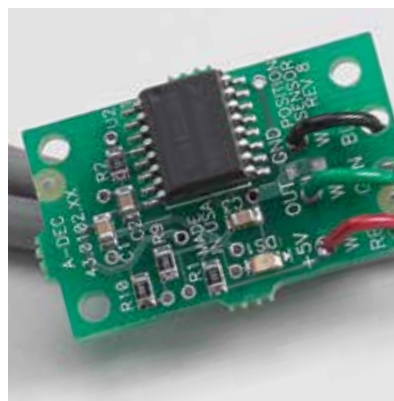

Блок управления: благодаря запатентованному дизайну при каждом включении обеспечивается поступление чистой воды для лечения.

Подъемный цилиндр : спроектирован и изготовлен A-dec, оснащен надежным гидравлическим приводом, требует меньшее количество деталей.

Датчик положения кресла: A-dec используют современные цифровые технологии для электронных датчиков.







Система A-dec 300: усовершенствованная

Дизайн

Прочная плита основания кресла для лучшей устойчивости. Помимо прочного основания, стоматологическое кресло A-dec 300 оснащено бесшумным и плавным гидравлическим подъемным цилиндром, который рассчитан на 20 лет безотказной работы.

Стоимость

Спроектированная по модульному принципу, A-dec 300 представляет собой гибкую систему, позволяющую подобрать необходимые вам характеристики в требуемом ценовом диапазоне.

Широкие возможности

Варианты рабочего места врача Traditional (с нижней подачей наконечников) или Continental (с верхней подачей наконечников) на ваш выбор. Выберите ли вы рабочее место врача для левши/правши или двустороннюю конфигурацию Radius®, наконечники и вспомогательные устройства всегда будут в зоне досягаемости.


Комфорт

Система распределения давления, сглаженные поверхности и специальный механизм спинки кресла обеспечивают пациенту возможность расслабиться в удобном положении. Кресло рассчитано на комфортное размещение пациентов весом до 181 кг (400 фунтов).

Доступ

Ваш пациент удобно располагается в кресле, положив голову на подголовник с двойной артикуляцией, а Вы имеете оптимальный доступ к операционному полю благодаря ультратонкой спинке. Кресло спроектировано с учетом многолетнего опыта. Благодаря такой комбинации вы можете не только работать в удобной для вас позе, но и получить лучший доступ к ротовой полости.



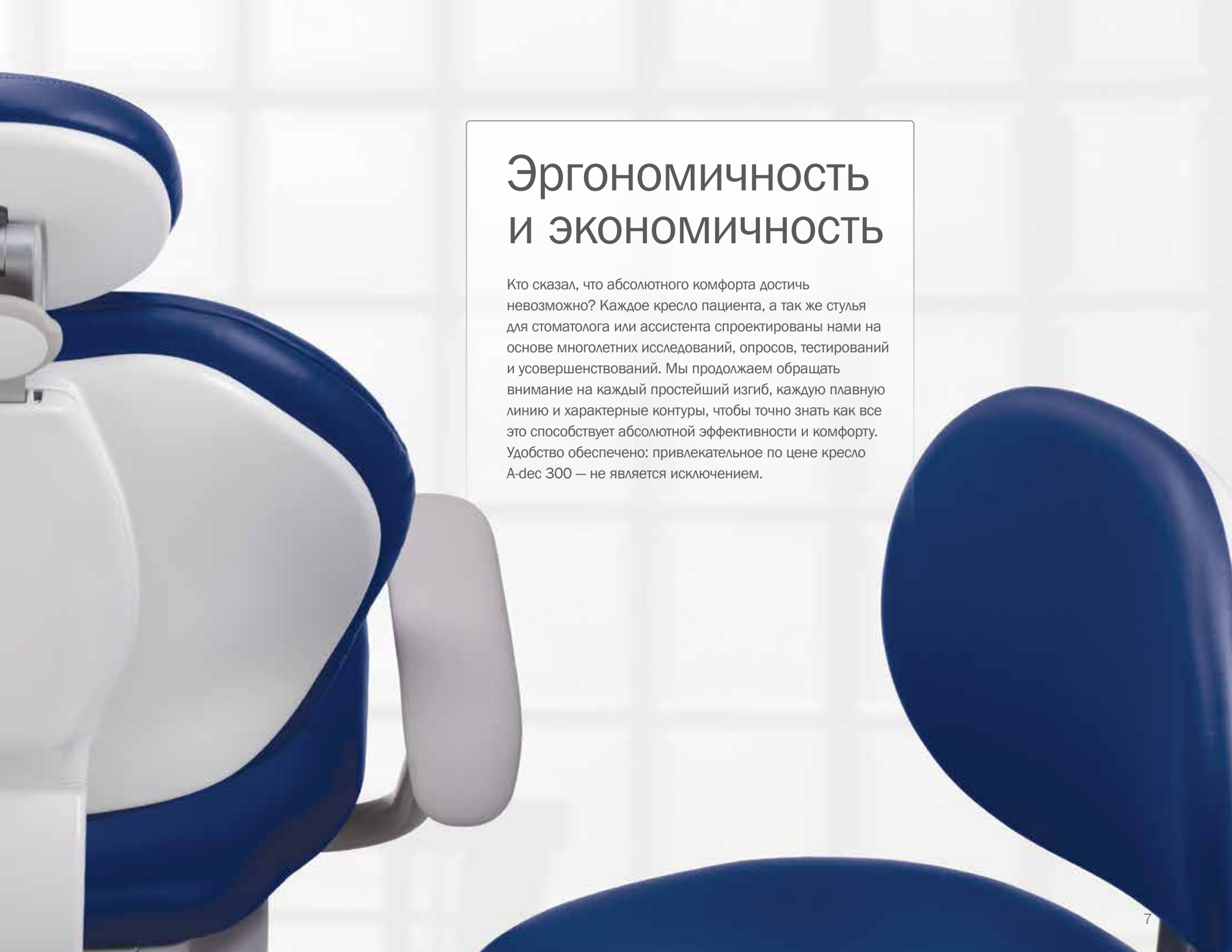

Эргономичность И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Кто сказал, что абсолютного комфорта достичь невозможно? Каждое кресло пациента, а так же стулья для стоматолога или ассистента спроектированы нами на основе многолетних исследований, опросов, тестирований и усовершенствований. Мы продолжаем обращать внимание на каждый простейший изгиб, каждую плавную линию и характерные контуры, чтобы точно знать как все это способствует абсолютной эффективности и комфорту. Удобство обеспечено: привлекательное по цене кресло A-dec 300 — не является исключением.

Работает в согласии с вами

Модель с опорной стойкой или система Radius — выбор за вами. Обе модели позволяют держать инструменты под рукой, чтобы не отвлекаться от лечения пациента.



A-dec 300

Опорный модуль на стойке

Рабочее место врача с верхней или с нижней подачей инструментов обеспечивает широкие возможности для вашей практики. Расположенная слева или справа стойка позволяет получить легкий доступ к сепаратору амальгамы, а контурная напольная коробка защищает уязвимые компоненты.



A-dec 300 Система Radius

Легко настраивается для работы правши или левши. Одинарный или двойной держатели Radius перемещаются вокруг передней части кресла для удобного доступа к пациенту во время лечения.

Педаль управления с рычагом

Педаль управления с рычагом от A-dec позволяет держать все под контролем. Интуитивный режим работы переключателя «Влажный/сухой» и клавиша «Воздух/Вспом. оборудование» позволяют не отвлекаться и сконцентрироваться на лечении пациента. С помощью минимальных движений ноги, вы можете точно управлять как электрическими, так и пневматическими наконечниками.

Огромный выбор



Прошита обивка, с подлокотниками



Traditional (нижняя подача)



Стандартная сенсорная панель



Педаль управления в виде диска



Бесшовная обивка, без подлокотников



Continental (верхняя подача)



Сенсорная панель Делюкс



Педаль управления с рычагом

Обивка и подлокотники

Все начинается с отличного кресла. Выбор огромен — начиная с мягкой прошитой обивки и заканчивая легко чистящейся бесшовной обивкой, с заказываемыми отдельно двухпозиционными подлокотниками либо без подлокотников.

Модули врача

Как Вы и Ваш персонал привыкли работать? Установка кресла в нужную позицию осуществляется простым нажатием на кнопки панели управления.

Сенсорная панель

Управление с помощью клавиатуры упрощает регулировку кресла и обеспечивает быстрый доступ к элементам управления стоматологическим светильником и плевательницей. Дополнительная лучшая сенсорная панель содержит вспомогательные элементы управления встроенными медицинскими устройствами, такими как электромоторы, камеры и скалеры.

Педали управления

В виде диска с функцией воздуходува или педали с рычагом для точного управления электрическими и пневматическими наконечниками.



Неподвижная стеклянная плевательница



Вращающаяся плевательница из сантехнического фарфора



3-позиционный держатель



4-позиционный держатель



Двойной 2-позиционный держатель



Светодиодный светильник A-dec 300 LED



Светодиодный светильник A-dec 500



Кронштейн монитора Radius



Кронштейн монитора на стойку светильника



Кронштейн монитора на стойку светильника с поворотным звеном

Плевательницы

Что вы предпочитаете — стекло или сантехнический фарфор? Фиксированную или вращающуюся плевательницу? Обе имеют чаши с функцией программирования времени наполнения и смыва.

Держатели инструментов ассистента

Размещайте инструменты ассистента там, где это наиболее удобно. Регулируемые 3- или 4-позиционные держатели доступны с креплением на кресле, кронштейне плевательницы или на телескопическом кронштейне.

Стоматологические светильники

Правильное освещение является необходимым условием работы стоматолога. Светодиодные светильники A-dec обеспечат сбалансированную интенсивность и равномерное освещение при отсутствии теней. К вашим услугам — автоматическая функция включения/выключения при перемещении кресла в положение для лечения и в исходное положение.


Кронштейны мониторов

Консультируйте. Просвещайте. Проверьте. Благодаря осям вращения кронштейнов мониторов обеспечивается комфортный обзор из сидячего и лежачего положений. Выберите вариант для себя, включая конструкцию с фиксацией или подвижный кронштейн, расположение ручки для перемещения монитора и несколько точек крепления.

Бесшовная обивка



Именно выбор цвета позволяет создавать окружающую обстановку, которая отражает вашу индивидуальность. Поэтому компания A-dec предлагает широкий спектр цветовых решений и вариантов, позволяющих сочетать бесшовную и обшитую обивку.

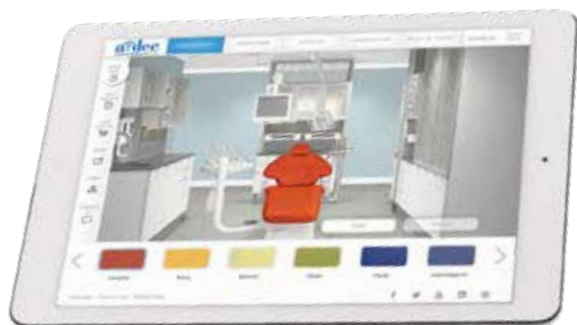

**Закажите образцы на веб-сайте
a-dec.com/InspireMe**

Прошитая обивка



Фактические цвета могут отличаться. Для получения самой актуальной информации об изделиях и образцов обивки обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Технические характеристики

Стоматологическое кресло A-dec 300

Диапазон перемещения кресла	От 349 до 800 мм (от 13,75 до 31,5 дюйма); нижняя точка 375 мм (14,75 дюйма), с установкой двух модулей
Тонкая гибкая спинка кресла	32 мм (1,25 дюйма), бесшовная
Система привода	Гибридный привод (электромеханический привод спишки, гидравлический привод основания кресла)
Датчик остановки движения спинки и основания кресла	Есть. Останавливает опускание при обнаружении препятствия
Подголовник	С двойной артикуляцией на выдвигной рейке (с круглой рукояткой)
Источник питания 300 Вт	Есть
Ножная педаль	Дополнительно
Вариант крепления	Подвижный на 2-дюймовой стойке, на опорной стойке или Radius (одинарное или двойное крепление)
Варианты обивки	Прошита или бесшовная

Модули врача

	Модуль врача A-dec 300 Continental (с верхней подачей наконечников)	Модуль врача A-dec 300 Traditional (с нижней подачей наконечников)
Блок управления	Стандартный на три 3 инструмента, Опциональный на 4 инструмента	Стандартный на три 3 инструмента, Опциональный на 4 инструмента
Трансформация для работы с правой или левой руки	Есть	Есть
Шланги	Виниловые или силиконовые	Виниловые или силиконовые
Положения держателей наконечников	4	4
Ручка(-и) тормоза	1 стандартная, 2-я дополнительная	1 стандартная, 2-я дополнительная
Варианты сенсорных панелей	Нет. Стандартная или улучшенная Делюкс	Нет. Стандартная или улучшенная Делюкс
Источник света для наконечников с подсветкой	Дополнительно	Дополнительно
Педаль управления	Стандартная или с рычагом	Стандартная или с рычагом
Система кронштейнов	Сбалансированный подвижный кронштейн с пневмотормозом A-dec 333 — кронштейн Radius A-dec 335 — опорный кронштейн	Сбалансированный подвижный кронштейн с пневмотормозом A-dec 332 — кронштейн Radius A-dec 334 — опорный кронштейн Ручная регулировка высоты A-dec 336 — кронштейн Radius









Головной офис компании A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Тел.: 1.800.225.010 для Австралии
Тел.: +61.(0)2.8332.4000 для других стран, кроме Австралии

A-dec China

Тел.: 400.600.5434 для Китая
Тел.: +86.571.89026088 для других стран, кроме Китая

A-dec United Kingdom

Тел.: 0800.233285 для Великобритании
Тел.: +44.(0).24.7635.0901 для других стран, кроме Великобритании

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения самой актуальной информации об изделиях и точных цветовых образцах обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Все товарные знаки в данном документе подпадают под действие соответствующих прав компании A-dec, ее аффилированных компаний и их совокупных поставщиков в США и зарубежных странах.