


A-dec® 300

a dec®

La diferencia de A-dec

Fabricado para una larga duración

Para A-dec ningún detalle es pequeño, ni siquiera los pernos que colocamos en nuestros productos. Es por esto que fabricamos la gran mayoría de nuestros equipos dentales finales a partir de las materias primas: un factor esencial para garantizar la calidad. Dado que estas partes pueden no verse a simple vista, marcan la diferencia en cuanto a la duración, el confort y la funcionalidad de cada uno de los productos que lleva nuestro nombre. Y para su negocio, esto es fundamental.

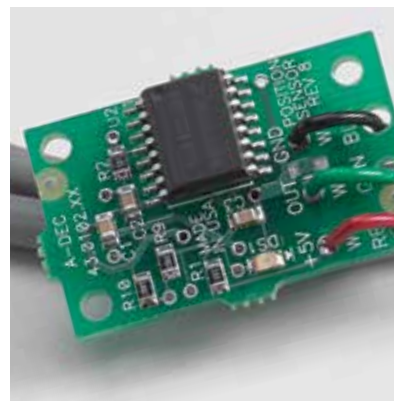

Bloque de control: el diseño patentado proporciona agua de tratamiento limpia con cada activación.

Cilindro de elevación: diseñado y fabricado por A-dec con un sistema hidráulico de gran potencia y menos piezas.

Sensor de posición del sillón: la tecnología de A-dec emplea señales digitales y sensores electrónicos precisos.







A-dec 300: evolucionado

Diseño

Una placa base sólida es fundamental para un sillón fuerte. Con un punto de apoyo firme, el A-dec 300 posiciona a los pacientes de manera silenciosa y suave con un cilindro de elevación hidráulico diseñado para una vida útil de 20 años.

Valor

Diseñado como una solución modular, A-dec 300 es un sistema integral que le permite elegir las características que desee, dentro del precio que necesite.

Flexibilidad

Traditional o Continental, la elección es suya. Ya sea que seleccione una configuración de dispensador Radius® ambidiestro o específico para izquierda/derecha, la pieza de mano y los accesorios están siempre al alcance.

Comodidad

Las superficies contorneadas y con mapeo de presión, y el respaldo con pivote virtual garantizan al paciente una experiencia con soporte y relax. Puede ser usado cómodamente por pacientes de hasta 181 kg (400 libras).

Acceso

Mientras su paciente descansa cómodamente, recostado en un apoyacabezas de doble articulación, su acceso es optimizado gracias a un respaldo de perfil ultradelgado. Diseñado a partir de años de experiencia, esta combinación fomenta una mejor posición para usted, a la vez que mejora el acceso a la cavidad bucal.





Ergonómico y económico

¿Quién dice que el máximo confort no es posible? Cada sillón de paciente y taburete de dentista o asistente que diseñamos está respaldado por décadas de investigación, diálogo, pruebas y mejoras. Nunca dejamos de fijarnos en cada simple curva, línea delicada y contorno inherente para asegurarnos de que ofrezca máxima eficacia y confort. Téngalo por seguro: El asequible A-dec 300 no es la excepción.

Trabaja igual que usted

Radius o Pedestal, usted elije. Ambas opciones cuentan con el instrumental al alcance para una atención del paciente sin interrupciones.



A-dec 300 con centro de soporte Pedestal

El dispensador Traditional o Continental añade tecnología a sus cirugías. El dispensador específico para derecha o izquierda ofrece fácil acceso al separador de amalgama y una sofisticada caja de conexiones contorneada que elimina los accesorios expuestos.



Sistema Radius A-dec 300

Alterne entre operadores derechos o zurdos fácilmente. El montaje simple o doble de Radius gira en torno a la parte anterior del sillón para un mejor acceso al paciente durante los procedimientos.



Control de pie con palanca

La opción de control de pie con palanca de A-dec le da el control. La intuitiva operación de lado a lado mojado/seco y el botón soplador/accesorio le permiten enfocarse en el tratamiento del paciente sin quitarle la vista. Con un mínimo movimiento del pie, obtiene una modulación precisa de las piezas de mano eléctricas y neumáticas.

Muchas opciones



Tapizado cosido con apoyabrazos



Traditional



Panel táctil estándar



Disco del control de pie



Tapizado sin costuras, sin apoyabrazos



Continental



Panel táctil de lujo



Control de pie con palanca

Tapizado y apoyabrazos

Todo comienza con un gran sillón. Tiene muchas opciones, desde un tapizado de felpa cosido o sin costuras de fácil limpieza, hasta el apoyabrazos con dos posiciones opcional.

Sistemas dispensadores

¿Cómo trabajan usted y su personal? Los sistemas dispensadores Traditional y Continental pueden integrar una fuente de iluminación intrabucal de tensión cuádruple y dos equipos auxiliares.

Panel táctil

El acceso táctil simplifica los ajustes del sillón y proporciona un acceso rápido al control de la lámpara dental y la escupidera. El panel táctil de lujo opcional añade controles para los dispositivos clínicos integrados, como motores eléctricos, cámaras y curetas.

Controles de pie

Estilo de disco con opción de botón soplador o el estilo con palanca de A-dec para una modulación precisa de las piezas de mano eléctricas y neumáticas.



Escupidera fija de vidrio



Soporte de 3 posiciones



Soporte de 4 posiciones



Escupidera de porcelana vidriada giratoria



Soporte doble de 2 posiciones



LED A-dec 300



LED A-dec 500



Montaje del monitor Radius



Montaje del monitor con luz



Montaje del monitor con luz con brazo de enlace

Escupideras

¿Qué prefiere? ¿Vidrio o porcelana vidriada? ¿Fija o giratoria? Ambos tazones incluyen funciones de tazón de enjuague y llenado de tazón sincronizados.

Soportes del asistente

Coloque los dispositivos clínicos del asistente donde más se necesitan. Hay soportes ajustables de 3 o 4 posiciones disponibles, como un montaje de sillón, de escupidera o un brazo telescópico.

Lámparas dentales

La iluminación precisa es fundamental. Las luces LED A-dec ofrecen intensidad equilibrada y un patrón de luz uniforme sin sombras. Se apaga/enciende automáticamente cuando el sillón se mueve a la posición de entrada o salida.


Montajes del monitor

Consultar. Educar. Revisar. Los montajes de monitor giran para acomodar la visualización desde la posición de sentado o supina. Adapte sus opciones, incluidas las ubicaciones de montaje múltiples, con manija de posicionamiento y estilo bloqueo o pivote flotante.

Tapizado sin costuras



El color hace la diferencia a la hora de crear un ambiente que refleje su personalidad. Es por eso que A-dec ofrece una gran variedad de colores y opciones para seleccionar y coordinar tapizados sin costura y cosidos.

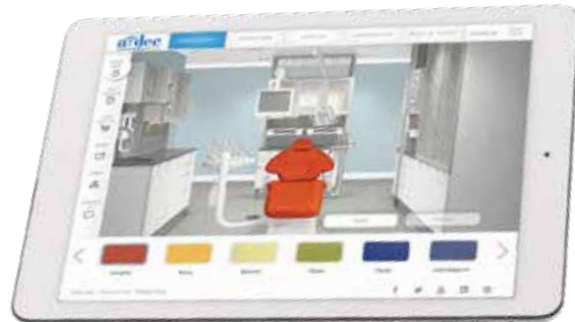

**Pida sus muestras en
a-dec.com/InspireMe**

Tapizado cosido



Los colores reales pueden variar. Consulte al distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores y la información del producto más actualizada.

Especificaciones

Sillón dental A-dec 300

Rango de altura de elevación	De 349 mm a 800 mm (13,75" a 31,5"); punto inferior de 375 mm (14,75") con montaje doble
Respaldo delgado y flexible	32 mm (1,25"), sin costura
Sistema de impulsión	Impulsión híbrida (inclinación electromecánica, base hidráulica)
Interruptor de parada del respaldo y la base del sillón	Sí, detiene el movimiento descendente cuando detecta una obstrucción
Apoyacabezas	Deslizable y de doble articulación (tipo de control)
Suministro eléctrico de 300 vatios integrado	Sí
Interruptor de pie	Opcional
Capacidades de montaje	Montaje con poste flotante de 51 mm (2"), pedestal o Radius (montaje simple o doble)
Opciones de tapizado	Con costuras o sin costuras

Sistemas dispensadores

	A-dec 300 Continental	A-dec 300 Traditional
Bloque de control	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional	3 posiciones estándar, 4 posiciones opcional
Conversión para mano izquierda/ derecha	Sí	Sí
Opciones de conductos	Vinilo o silicona	Vinilo o silicona
Posiciones del soporte de la pieza de mano	4	4
Mangos del freno	1 estándar (2 opcionales)	1 estándar (2 opcionales)
Opciones de panel táctil	Ninguno, estándar o de lujo	Ninguno, estándar o de lujo
Fuente de iluminación intrabucal de cuádruple voltaje	Opcional	Opcional
Control de pie	Estándar, botón soplador o manija	Estándar, botón soplador o manija
Sistema de brazo	Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje A-dec 333 Radius Montaje de soporte A-dec 335	Brazo flexible balanceado con freno de aire Montaje A-dec 332 Radius Montaje de soporte A-dec 334 Ajuste de altura manual Montaje A-dec 336 Radius









Oficina central de A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 EE. UU.
Tel: 1.800.547.1883 en EE. UU./Canadá
Tel: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canadá
Fax: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia

Tel: 1.800.225.010 desde Australia
Tel: +61.(0)2.8332.4000 desde fuera de Australia

A-dec China

Tel: 400.600.5434 desde China
Tel: +86.571.89026088 desde fuera de China

A-dec Reino Unido

Tel: 0800.233285 desde el Reino Unido
Tel: +44.(0).24.7635.0901 desde fuera del Reino Unido

Los colores y productos mostrados pueden diferir de los materiales reales y están sujetos a cambios sin previo aviso. Comuníquese con su distribuidor de A-dec autorizado para obtener muestras de colores exactos y la información más reciente sobre los productos.

Todas las marcas comerciales de este documento están sujetas a los derechos de marcas comerciales de A-dec, sus filiales y los proveedores colectivos que están en Estados Unidos y los demás países.

© 2022 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.
85.6152.27/PP/500/6-22/Rev G